




理想の切れ味 充実のラインアップ


KAIは 医療の安全とQOLを
追究し続けます



- ・精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状
- ・特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味

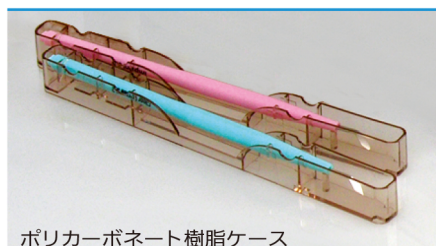

ポリカーボネート樹脂ケース

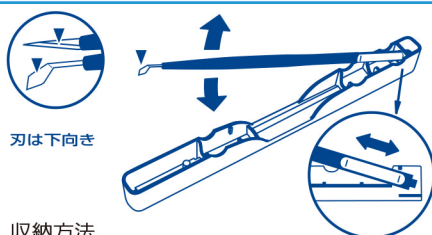

刃は下向き

収納方法



- デイスポザブル(単回使用)
- ポリブチレンテレフタレート樹脂ハンドル
- EOG滅菌済み
- GS1-128/ JANコード対応
- 5本/箱入

AG=anti-glare=反射防止タイプ

ストレートナイフ

STRAIGHT KNIVES

- ・ 刃先はカミソリの刃付け技術を活かした3段刃で、鋭い切れ味が特長です。
- ・ NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。
- ・ 強膜半層切開やサイドポート作成に適しています。

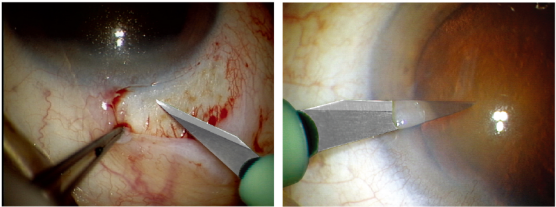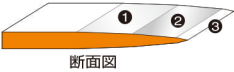


A-0F angle0° 	A-225F angle22.5° w=1.7mm 	A-45F angle45° w=1.7mm
A-15F angle15° w=1.7mm 	A-30F angle30° w=1.7mm 	

クレセントナイフ

CRESCENT KNIVES

- ・ NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。
- ・ 特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・ 強角膜トンネルフラップ作成に適しています。

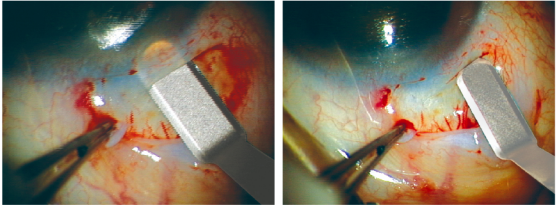


CPU-16AGF w=1.6mm 3.0mm 4.0mm angle45° Bevel Up 	CPS-22AGF w=2.2mm angle0° Bevel Up 	CWU-26AGF w=2.6mm angle60° Bevel Up
CPU-22AGF w=2.2mm angle45° Bevel Up 	CPU-26AGF w=2.6mm angle45° Bevel Up 	CWD-26AGF w=2.6mm angle60° Bevel Down
CWU-22AGF w=2.2mm angle45° Bevel Up 	CPD-26AGF w=2.6mm angle45° Bevel Down 	

MVRナイフ

MVR KNIVES

- ・ 独自のフォーミングテクノロジーで、バラツキの少ない刃先形状です。
- ・ 特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・ 硝子体手術の強角膜穿刺切開に適しています。
- ・ 白内障手術のサイドポート作成に適しています。

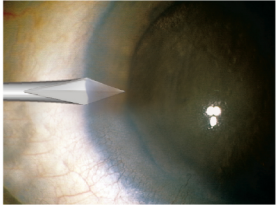


VK-19GF w=1.5mm φ=1.0mm 	VKB-20GF w=1.3mm φ=0.9mm 	VK-25GF w=0.6mm φ=0.5mm
VK-20GF w=1.3mm φ=0.9mm 	VK-23GF w=0.75mm φ=0.6mm 	

インプラントナイフ

INPLANT KNIVES

- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。
- ・特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・独自の先端形状で、IOL挿入のための創口拡大に適しています。

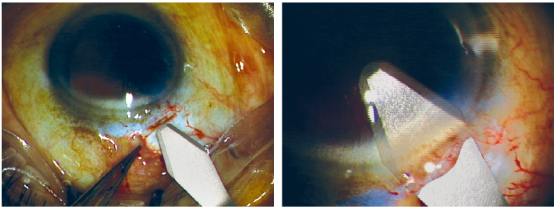


RNU-28AGF w=2.8mm Bevel Up 	RNU-35AGF w=3.5mm Bevel Up 	RNU-51AGF w=5.1mm Bevel Up
RNU-30AGF w=3.0mm Bevel Up 	RNU-41AGF w=4.1mm Bevel Up 	RNU-52AGF w=5.2mm Bevel Up
RNU-32AGF w=3.2mm Bevel Up 	RNU-46AGF w=4.6mm Bevel Up 	RNU-56AGF w=5.6mm Bevel Up

ブレブナイフ

BLEB KNIVES

- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。
- ・特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・独自の先端形状で、ニードリングや濾過胞再建に適しています。

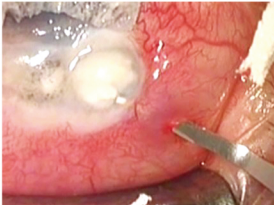


BKB2-10AGF w=1.0mm angle45° Bevel Up ベントタイプ 	BKS-10AGF w=1.0mm ストレートタイプ 	BKB-10AGF w=1.0mm angle45° Bevel Up ベントタイプ
--	---	---

パラセンテシスナイフ

PARACENTESIS KNIFE

- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。
- ・特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・1mm幅のサイドポート作成に適しています。

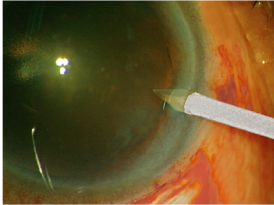


PCT-10F w=1.0mm

クリアコーニアルナイフ

CLEAR CORNEAL KNIVES

- ・独自のフォーミングテクノロジーで、バラツキの少ない刃先形状です。
- ・特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・角膜切開および強角膜切開に適しています。

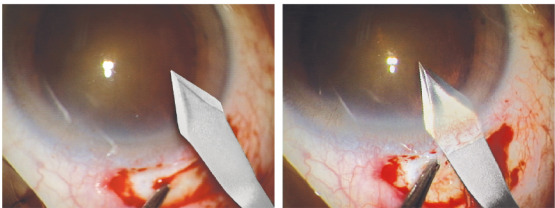


CCR-18AGF w=1.8mm Double Bevel	CCR-24AGF w=2.4mm Double Bevel	CCR-28AGF w=2.8mm Double Bevel
CCR-20AGF w=2.0mm Double Bevel	CCR-25AGF w=2.5mm Double Bevel	CCR-30AGF w=3.0mm Double Bevel
CCR-22AGF w=2.2mm Double Bevel	CCR-265AGF w=2.65mm Double Bevel	CCR-32AGF w=3.2mm Double Bevel
CCR-23AGF w=2.3mm Double Bevel	CCR-275AGF w=2.75mm Double Bevel	

スリットナイフ

SLIT KNIVES

- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。
- ・特殊刃先仕上げにより、バラツキを低減させ、優れた切れ味を有しています。
- ・強角膜穿刺切開に適しています。


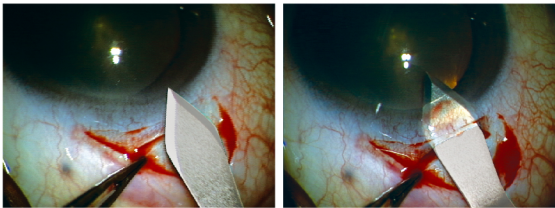


SLU-13AGF w=1.3mm Bevel Up	SLU-20AGF w=2.0mm Bevel Up	SLU-28AGF w=2.8mm Bevel Up
SLU-14AGF w=1.4mm Bevel Up	SLU-22AGF w=2.2mm Bevel Up	SLU-285AGF w=2.85mm Bevel Up
SLU-15AGF w=1.5mm Bevel Up	SLU-23AGF w=2.3mm Bevel Up	SLU-30AGF w=3.0mm Bevel Up
SLU-16AGF w=1.6mm Bevel Up	SLU-24AGF w=2.4mm Bevel Up	SLU-31AGF w=3.1mm Bevel Up
SLU-17AGF w=1.7mm Bevel Up	SLU-25AGF w=2.5mm Bevel Up	SLU-32AGF w=3.2mm Bevel Up
SLU-18AGF w=1.8mm Bevel Up	SLU-265AGF w=2.65mm Bevel Up	SLU-35AGF w=3.5mm Bevel Up
SLU-19AGF w=1.9mm Bevel Up	SLU-275AGF w=2.75mm Bevel Up	

KKMナイフ

経結膜・強角膜一面切開用ナイフ

- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。

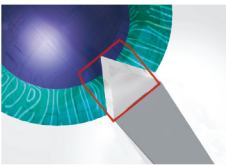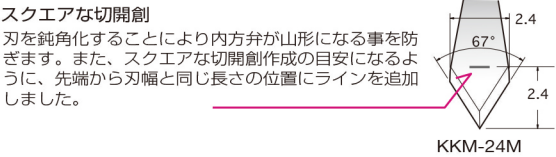

KKM-20M w=2.0mm Double Bevel			理想的な切開軌道 バイベレルで裏面の刃幅を徐変させることにより、角膜実質に到達するまでは角膜のカーブに沿って切り上げ易く、前房に穿孔する際には虹彩と平行(やや上方)に進め易くなっています。	
KKM-22M w=2.2mm Double Bevel		KKM-24M w=2.4mm Double Bevel		KKM-275M w=2.75mm Double Bevel


サイドポートナイフ ストレート

SIDEPORT KNIFE STRAIGHT


- ・1mm幅のサイドポートを安定的に作成できます。
- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。



刃先はカミソリの刃付け技術を活かした3段刃で、鋭い切れ味が特長です。

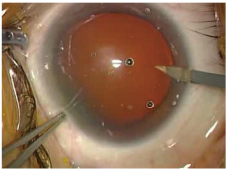



SP-S15 angle15° w=1.0mm t=0.1mm		SP-S30 angle30° w=1.0mm t=0.1mm	
---	--	---	--

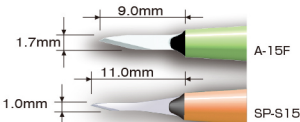

従来のストレートナイフと同様の感覚でご使用になれます。

サイドポートナイフ トラペゾイド


SIDEPORT KNIFE TRAPEZOID

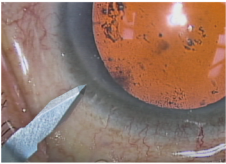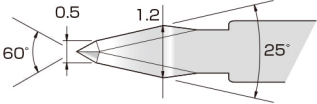

操作性の向上
ベントタイプは、30° の角度で曲げており、ヘッドがコンパクトなので、奥目や眼瞼裂の狭い患者に対して理想的な角度での刺入が可能です。

SP-T12 ベントタイプ w=1.2mm angle30° 4.5mm		SP-T12S ストレートタイプ w=1.2mm angle 0°	
--	--	--	--


浅前房にも最適
15° や22.5° のストレートナイフと比較して、短い距離で最適な大きさの台形の創口を開けることができ、核を傷つける危険性が減ることので、特に浅前房の患者に対して有効です。また、刺入する深さで創口のサイズを調整することが可能で、左右に十分な長さの刃がついており創口を拡大することも容易です。

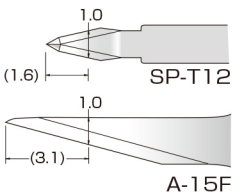

サイドポートナイフ ユーティリティー

SIDEPORT KNIFE UTILITY


- ・1mm幅のサイドポートを安定的に作成できます。
- ・NC加工により、均一で鋭利な先端形状です。

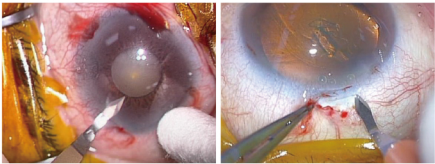

リトラクター使用時のポート作成が容易
ベントタイプは45° で曲げている為、上方/耳側/鼻側どの方向からも刺入が可能で、小瞳孔の患者様にリトラクターを使用する際のポート作成が容易です。


安定したサイドポートの作成が可能
再現性が高く、安定し1mm幅のサイドポートが作成可能です。また、曲げ位置から先端までの長さが4mmとコンパクトな為、特に浅前房や眼瞼裂の狭い患者様に有用です。

SP-U10 ベントタイプ w=1.0mm t=0.2mm 4.0mm angle45°		SP-U10S ストレートタイプ w=1.0mm angle 0°	
---	--	--	--

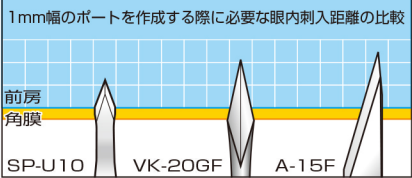

KAI マイクロサージェリー ナイフ

MICROSURGERY KNIVES STERILE • STAINLESS STEEL • SINGLE USE

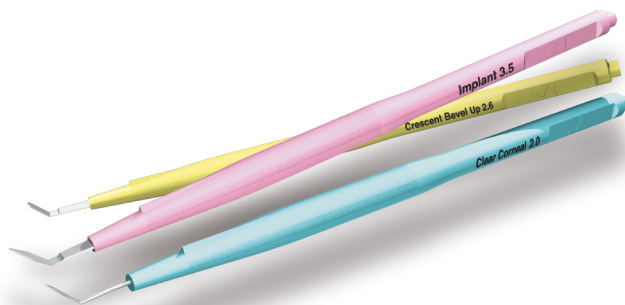

販売名：マイクロサージェリーナイフ
医療機器認証番号：219ABBZX00200000

仕様は変更することがあります

 製造販売元
カイ インダストリーズ株式会社
国内営業部 医療器
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
Phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
Email: info-ind@kai-group.com
<http://www.kai-ind.co.jp>