






理想の切れ味 充実のラインアップ
KAIは医療の安全とQOLを
追究し続けます



ストレートナイフ STRAIGHT KNIVES

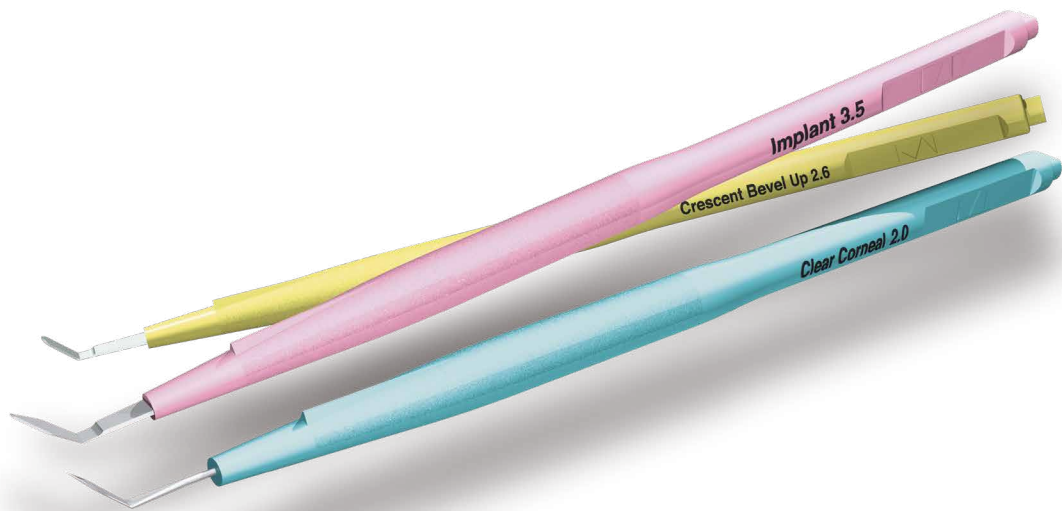

強膜半層切開やサイドポート作成に適しています。

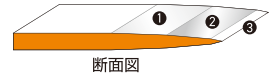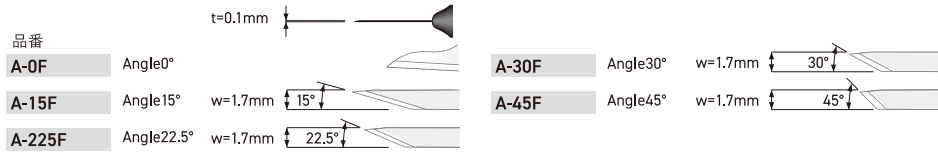


刃先はカミソリの刃付け技術を活かした3段刃で、鋭い切れ味が特長です。

クレセントナイフ CRESCENT KNIVES




強角膜トンネルフラップ作成に適しています。

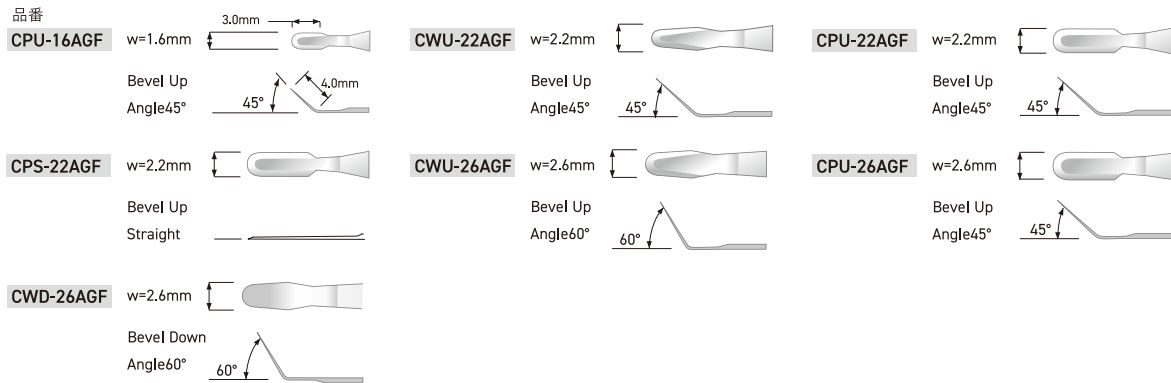

MVRナイフ MVR KNIVES




硝子体手術の強膜穿刺切開に適しています。
白内障手術のサイドポート作成に適しています。

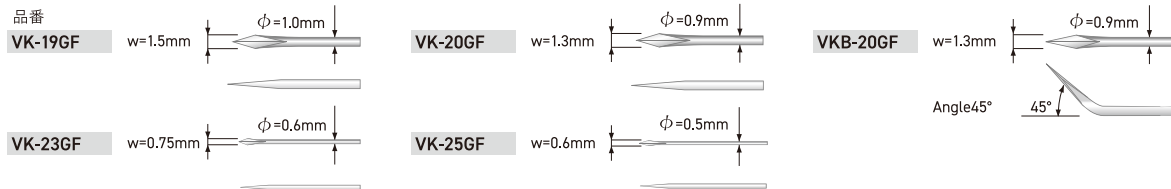

パラセンテシスナイフ PARACENTESIS KNIFE




1mm幅のサイドポート作成に適しています。

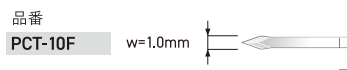


サイドポートナイフ ストレート SIDEPORT KNIFE STRAIGHT



品番	Angle	w	t
SP-S15	Angle15°	w=1.0mm	t=0.1mm
SP-S15-W07	Angle15°	w=0.7mm	t=0.1mm
SP-S30	Angle30°	w=1.0mm	t=0.1mm
SP-S30-W06	Angle30°	w=0.6mm	t=0.1mm

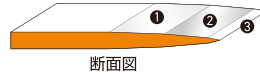

刃先はカミソリの刃付け技術を活かした3段刃で、鋭い切れ味が特長です。

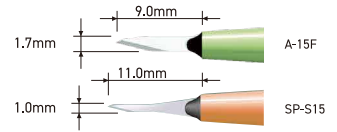

従来のストレートナイフと同様の感覚でご使用になれます。

サイドポートナイフトラペゾイド SIDEPORT KNIFE TRAPEZOID




操作性の向上

ベントタイプは30°の角度で曲げており、ヘッドがコンパクトなので、奥目や眼瞼裂の狭い患者様に対しても理想的な角度での刺入が可能です。

品番	Type	Angle	w	t
SP-T12	ベントタイプ	Angle30°	w=1.2mm	t=4.5mm
SP-T12S	ストレートタイプ	Straight	w=1.2mm	t=4.5mm

浅前房にも最適

15°や22.5°のストレートナイフと比較して、短い距離で最適な大きさの台形の創口を開けることができ、核を傷つける危険性が減ることで、特に浅前房の患者様に対して有用です。また、刺入する深さで創口のサイズを調整することが可能で、左右に十分な長さの刃がついており創口を拡大することも容易です。

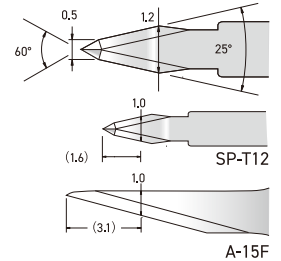

サイドポートナイフ ユーティリティー SIDEPORT KNIFE UTILITY




リトラクター使用時のポート作成が容易

ベントタイプは45°で曲げているため、上方/耳側/鼻側どの方向からも刺入が可能で、小瞳孔の患者様にリトラクターを使用する際のポート作成が容易です。

品番	Type	Angle	w	t
SP-U10	ベントタイプ	Angle45°	w=1.0mm	t=0.2mm
SP-U10S	ストレートタイプ	Straight	w=1.0mm	t=0.2mm

安定したサイドポートの作成が可能

再現性が高く、安定して1mm幅のサイドポートが作成可能です。また、曲げ位置から先端までの長さが4mmとコンパクトなため、特に浅前房や眼瞼裂の狭い患者様に有用です。

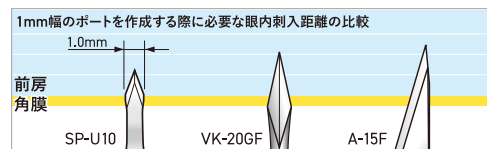

サイドポートナイフ アシンメトリー SIDEPORT KNIFE ASYMMETRY



1本で強膜半層切開も可能

刃の形状を非対称にすることで十分な刃幅を確保し、刃先をコンパクトにし十分な強度を持たせることにより、サイドポートだけではなく強膜の半層切開にも使用可能です。


リトラクター使用時のポート作成が容易(ベントタイプ)

ベントタイプは45°で曲げているため、上方/耳側/鼻側どの方向からも刺入が可能で、小瞳孔の患者様にリトラクターを使用する際のポート作成が容易です。

品番	Type	Angle	w	t
SP-A10	ベントタイプ	Angle45°	w=1.0mm	t=0.2mm
SP-A10S	ストレートタイプ	Straight	w=1.0mm	t=0.2mm


短い刺入距離で安定したサイドポートの作成が可能

MVRや15°のストレートナイフと比較して短い刺入距離でサイドポートの作成が可能となり、また、再現性が高く安定して1mm幅の創口を作成することが可能です。ベントタイプは曲げ位置から先端までの長さが4mmとコンパクトなため、特に奥目や浅前房の患者様に有用です。

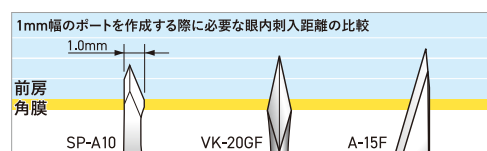



KKMナイフ

経結膜・強角膜一面切開用ナイフ

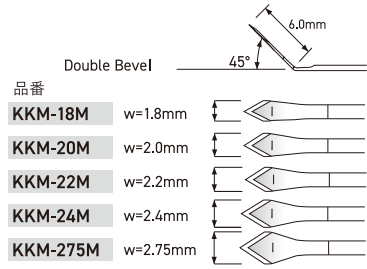


スクエアな切開創

刃を鈍角化することにより内方弁が山形になることを防ぎます。また、スクエアな切開創作成の目安になるように、先端から刃幅と同じ長さの位置にラインを追加しました。

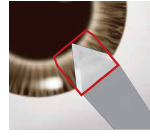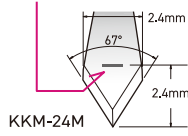

理想的な切開軌道

バイベベルで裏面の刃幅を徐変させることにより、角膜実質に到達するまでは角膜のカーブに沿って切り上げ易く、前房に穿孔する際には虹彩と平行(やや上方)に進め易くなっています。


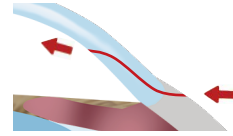


強角膜一面切開ナイフ

KMU KNIVES



優れたコントロール性で3次元的な創構築が可能です。

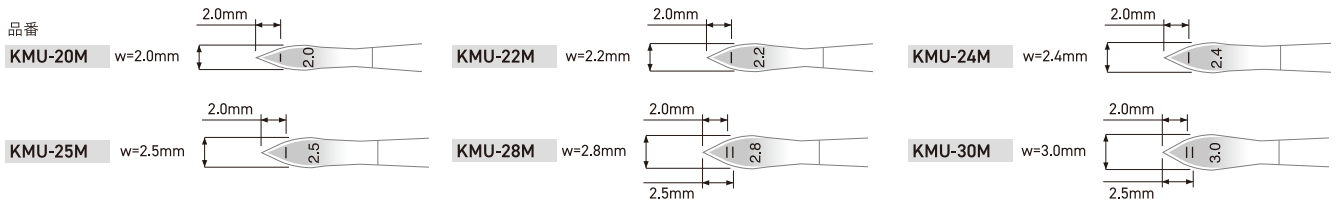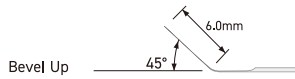

強角膜一面切開にこだわったナイフ形状



- ①最大幅よりも根本側も薄く研削し、想定切開線に容易に修正可能です。
- ②ラインを入れることで理想的なトンネル長が得やすいです。
- ③ナイフ形状を釣鐘型とすることで剝入抵抗を低減しました。

アーチナイフ

ARCHED KNIFE



1.7mm幅の位置にドットが入れてあり、切開時の目安になります。

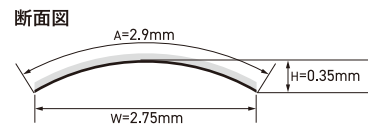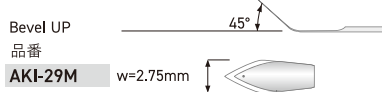


クリアコーニアルナイフ

CLEAR CORNEAL KNIVES



角膜切開および強角膜切開に適しています。

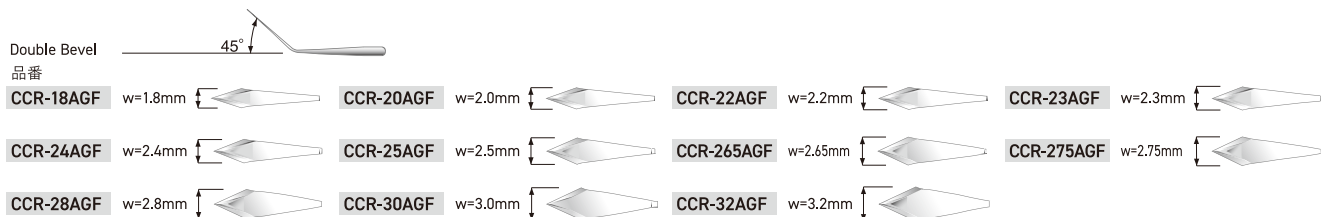

スリットナイフ SLIT KNIVES




強角膜切開に適しています。



品番

SLU-13AGF	w=1.3mm		SLU-14AGF	w=1.4mm		SLU-15AGF	w=1.5mm		SLU-16AGF	w=1.6mm	
SLU-17AGF	w=1.7mm		SLU-18AGF	w=1.8mm		SLU-19AGF	w=1.9mm		SLU-20AGF	w=2.0mm	
SLU-22AGF	w=2.2mm		SLU-23AGF	w=2.3mm		SLU-24AGF	w=2.4mm		SLU-25AGF	w=2.5mm	
SLU-265AGF	w=2.65mm		SLU-275AGF	w=2.75mm		SLU-28AGF	w=2.8mm		SLU-285AGF	w=2.85mm	
SLU-30AGF	w=3.0mm		SLU-32AGF	w=3.2mm							

スリットナイフパラレルサイド SLIT KNIFE PARALLEL SIDES

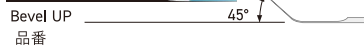


品番

SLP-20	w=2.0mm	
SLP-22	w=2.2mm	
SLP-24	w=2.4mm	
SLP-28	w=2.8mm	


創口拡大リスクの軽減

従来のスリットナイフでは、引き抜く際に斜めになってしまった場合、創口を不用意に広げてしまう可能性があります。根本まで最大幅を維持した形状にすることにより、まっすぐに引き抜くようにガイドされ、創口が広がってしまうリスクを軽減します。

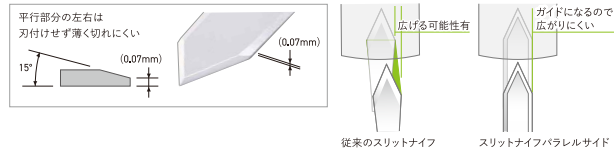

操作性の向上

曲げ位置から先端までの長さを2mm短くすることにより、上方からアプローチする際の操作性を改善しました。(特に眼瞼裂の狭い患者様に有用です。)

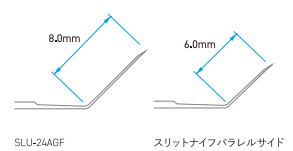

スリットナイフトリプルカット SLIT KNIFE TRIPLE CUT





品番

SLT-24	w=2.4mm	
SLT-265	w=2.65mm	
SLT-28	w=2.8mm	
SLT-30	w=3.0mm	

角膜切開にこだわったナイフ形状

・表2面、裏1面の3面を研削
・虹彩に平行にまっすぐにナイフを進めるだけで、理想的なドーム状の創口作成が可能です。

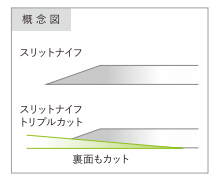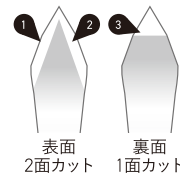

ドーム状切開創のメリット

ドーム部分が強固な弁の役割を果たし、角膜切開においても理想的な自己閉鎖弁を作成することができます。



DSAEKナイフ DSA EK KNIVES




品番

DSK-46	w=4.6mm	
DSK-50	w=5.0mm	


角膜径を考慮した刃先形状

4.6mmと5.0mmで先端開き角度を変えることで、刃先先端部分から最大幅までの長さを揃えました。より安全に創口を作成することが可能です。

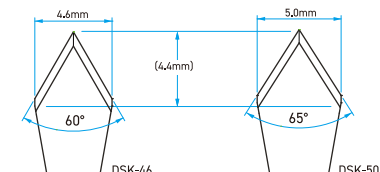

バイベベルで鋭い切れ味


一度の穿孔で移植片挿入に必要な創口を作成するため、切れ味を重視しました。バイベベルにして刃付けの角度をより鋭角にすることで、鋭い切れ味を実現しました。

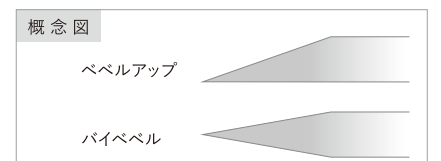

ブレブナイフ BLEB KNIVES





独自の先端形状で、ニードリングや濾過法再建術に適しています。

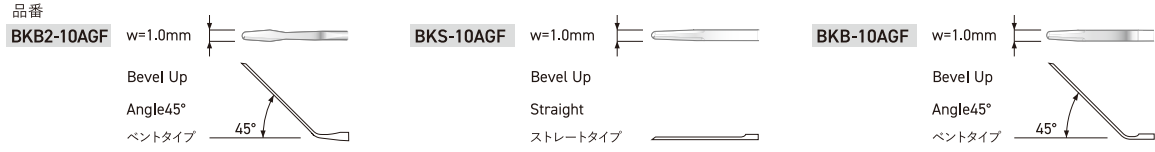


リビジョン スリットナイフ REVISION SLIT KNIFE

柄が短いため操作性に優れ、特にスリットランプを用いた濾過法再建術において有用です。

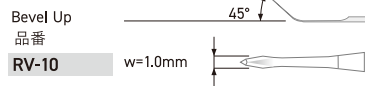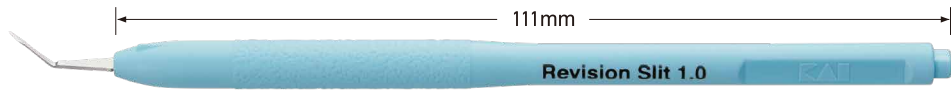


効率的な再建が可能

サイドにも十分な長さの刃がついていることにより、注射針と比較して固い瘢痕組織でも効率的に濾過胞の再建が可能です。

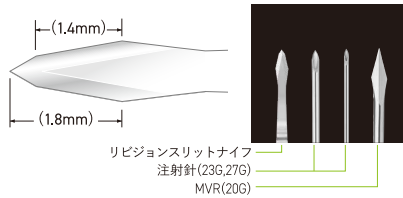


低侵襲での再建が可能

根元の幅を0.8mmと細くすることで、結膜刺入部の創口拡大を最小限に抑えることが可能です。

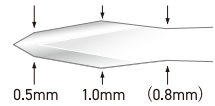


優れた切れ味

優れた切れ味で剪刀で結膜を切開することなく結膜下への刺入が可能です。

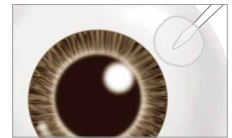

ゴルフ刀 SCLERAL KNIFE

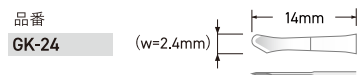


- ・刃体が短く、手で操作しやすい構造になっています。
- ・コンパクトな刃体形状になっています。
- ・強膜フラップの作成、翼状片処置等に適しています。

インプラントナイフ IMPLANT KNIVES



独自の先端形状で、IOL挿入のための創口拡大に適しています。

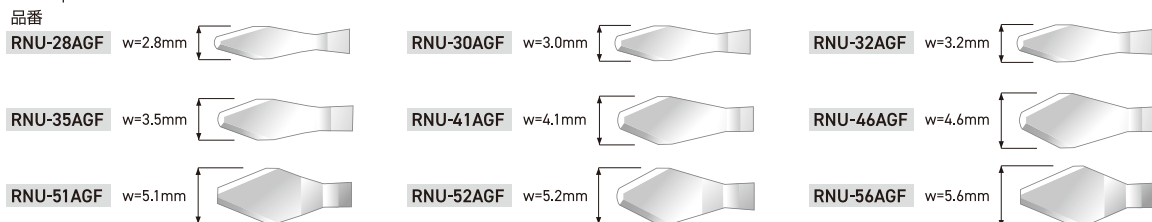


涙嚢切開ナイフ MICRO KNIFE



品番

DCR-15

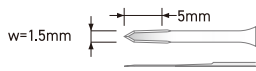

涙嚢切開にこだわった刃体形状

- ・刃体の両サイドに十分な長さの刃を付けることにより、効率的な涙嚢切開が可能となりました。
- ・ストレートタイプとし、鼻腔内での操作性を考慮した刃体長さとなりました。

販売名：マイクロナイフ
医療機器認証番号：219ABBZX00196000
ディスプレイ（単回使用）・EOG滅菌済み

硝子体注射キャリパー



品番

SC3540

眼球曲線に沿ってマーキングしやすい、S字形状

販売名：KAI硝子体注射キャリパー
医療機器届出番号：21B2X00002000009
未滅菌

トーリックゲージ/マーカー TORIC GAUGE & MARKER




品番

TOGM

- ・初期導入コストの低減、同日の乱視矯正眼内レンズ複数症例への対応等、症例数の状況に応じて柔軟に対応できます。
- ・顕微鏡の反射光を軽減するため、ゲージ面角度に傾斜をつけ視認性が向上しました。
- ・ハンドルの根本部を外径幅まで広げることで、安定したマーキングが可能です。
- ・ゲージの底面に滑り止め用の突起部を設けています。



日本人の眼を考慮した口径サイズです。KAIトーリックゲージでは、内径11.5mmを採用しています。

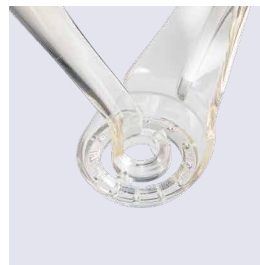

透明性の高い樹脂素材を採用し、手術視野を妨げず、マーキング時の眼球の状態やマーキング確認が容易です。




ゲージとマーカーのセット品で滅菌済みのため、作業効率化が図れます。単回使用のため、感染リスクの低減に有用です。


販売名：KAIトーリックゲージ/KAIトーリックマーカー
医療機器認証番号：302ABBZX00020000
ディスプレイ（単回使用）・γ線滅菌

セーフティナイフ SAFETY KNIVES


簡単な操作で使用・収納が可能な安全機構付き眼科メスです。

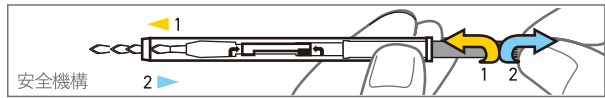


ストレートナイフ STRAIGHT KNIVES

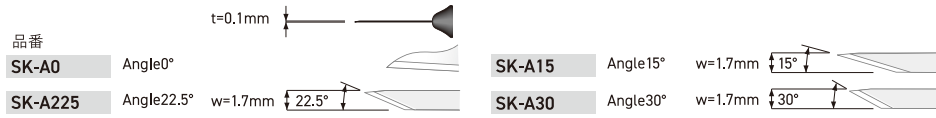

クレセントナイフ CRESCENT KNIVES

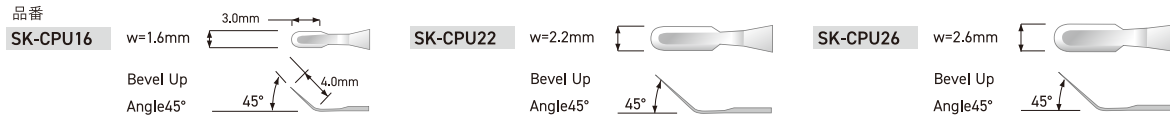


クリアコーニアルナイフ CLEAR CORNEAL KNIVES

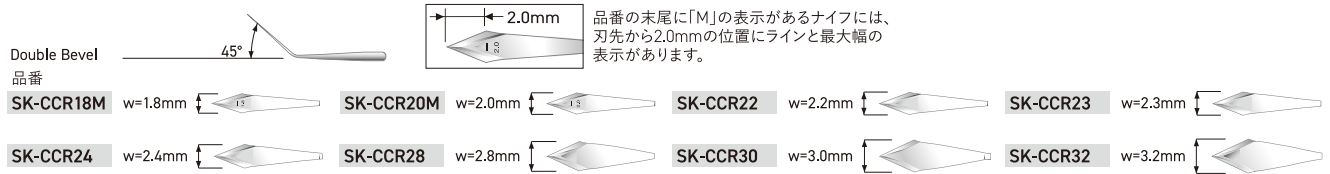

スリットナイフ SLIT KNIVES




MVRナイフ MVR KNIFE

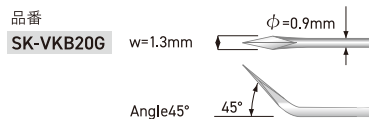

KAI眼科メス 定価一覧表

マイクロサージェリーナイフ

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
ストレートナイフ 0°	A-0F	000MK3000	4560146925330	5本	¥3,500
ストレートナイフ 15°	A-15F	000MK3001	4560146922391	5本	¥3,500
ストレートナイフ 22.5°	A-225F	000MK3007	4560146922728	5本	¥3,500
ストレートナイフ 30°	A-30F	000MK3003	4560146922322	5本	¥3,500
ストレートナイフ 45°	A-45F	000MK3005	4560146922384	5本	¥3,500
クレセントナイフ 1.6mm	CPU-16AGF	000MK4316	4560146926016	5本	¥13,250
クレセントナイフ 2.2mm	CPU-22AGF	000MK4322	4560146924685	5本	¥13,250
クレセントナイフ 2.2mm	CWU-22AGF	000MK4360	4560146926559	5本	¥13,250
クレセントナイフ 2.2mm Straight	CPS-22AGF	000MK4350	4560146926726	5本	¥13,250
クレセントナイフ 2.6mm	CPU-26AGF	000MK4326	4560146923305	5本	¥13,250
クレセントナイフ 2.6mm	CWU-26AGF	000MK4361	4560146924012	5本	¥13,250
クレセントナイフ 2.6mm Bevel Down	CWD-26AGF	000MK4362	4560146924173	5本	¥13,250
MVRナイフ 19G	VK-19GF	000MK3719	4560146922650	5本	¥9,000
MVRナイフ 20G	VK-20GF	000MK3720	4560146922643	5本	¥9,000
MVRナイフ 20G Bent	VKB-20GF	000MK3740	4560146924487	5本	¥9,000
MVRナイフ 23G	VK-23GF	000MK3718	4560146926399	5本	¥9,000
MVRナイフ 25G	VK-25GF	000MK3717	4560146926542	5本	¥9,000
パラセンテシスナイフ 1.0mm	PCT-10F	000MK3410	4560146922711	5本	¥12,000
サイドポートナイフストレート 15° 1.0mm	SP-S15	000MK4400	4560146926429	5本	¥3,500
サイドポートナイフストレート 15° 0.7mm	SP-S15-W07	000MK4403	4560146927594	5本	¥3,500
サイドポートナイフストレート 30° 1.0mm	SP-S30	000MK4401	4560146926849	5本	¥3,500
サイドポートナイフストレート 30° 0.6mm	SP-S30-W06	000MK4402	4560146927211	5本	¥3,500
サイドポートナイフトラペゾイド 1.2mm	SP-T12	000MK4410	4560146926443	5本	¥7,500
サイドポートナイフトラペゾイド 1.2mm Straight	SP-T12S	000MK4411	4560146926733	5本	¥7,500
サイドポートナイフユーティリティ 1.0mm	SP-U10	000MK4420	4560146926450	5本	¥7,500
サイドポートナイフユーティリティ 1.0mm Straight	SP-U10S	000MK4421	4560146926740	5本	¥7,500
サイドポートナイフアシンメトリー 1.0mm	SP-A10	000MK4430	4560146927099	5本	¥7,500
サイドポートナイフアシンメトリー 1.0mm Straight	SP-A10S	000MK4431	4560146927105	5本	¥7,500
KKMナイフ 1.8mm	KKM-18M	000MK4704	4560146927112	5本	¥10,000
KKMナイフ 2.0mm	KKM-20M	000MK4700	4560146925972	5本	¥10,000
KKMナイフ 2.2mm	KKM-22M	000MK4701	4560146925989	5本	¥10,000
KKMナイフ 2.4mm	KKM-24M	000MK4702	4560146925996	5本	¥10,000
KKMナイフ 2.75mm	KKM-275M	000MK4703	4560146926009	5本	¥10,000
強角膜一面切開ナイフ 2.0mm	KMU-20M	000MK3920	4560146928072	5本	¥9,500
強角膜一面切開ナイフ 2.2mm	KMU-22M	000MK3922	4560146927617	5本	¥9,500
強角膜一面切開ナイフ 2.4mm	KMU-24M	000MK3924	4560146927457	5本	¥9,500
強角膜一面切開ナイフ 2.5mm	KMU-25M	000MK3925	4560146928164	5本	¥9,500
強角膜一面切開ナイフ 2.8mm	KMU-28M	000MK3928	4560146927464	5本	¥9,500
強角膜一面切開ナイフ 3.0mm	KMU-30M	000MK3930	4560146927471	5本	¥9,500
アーチナイフ 2.9mm	AKI-29M	000MK4801	4560146926085	5本	¥12,500
クリアコーニアルナイフ 1.8mm	CCR-18AGF	000MK3809	4560146925910	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.0mm	CCR-20AGF	000MK3800	4560146924050	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.2mm	CCR-22AGF	000MK3806	4560146924777	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.3mm	CCR-23AGF	000MK3807	4560146924746	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.4mm	CCR-24AGF	000MK3808	4560146924753	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.5mm	CCR-25AGF	000MK3801	4560146924067	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.65mm	CCR-265AGF	000MK3802	4560146924074	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.75mm	CCR-275AGF	000MK3810	4560146926481	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 2.8mm	CCR-28AGF	000MK3803	4560146924081	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 3.0mm	CCR-30AGF	000MK3804	4560146924098	5本	¥9,500
クリアコーニアルナイフ 3.2mm	CCR-32AGF	000MK3805	4560146924104	5本	¥9,500

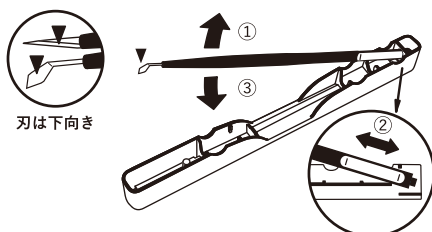

<取り出し方法>

刃がどこにも触れないように細心の注意を払いながら、左図①の部分を上を持ち上げてください。
(刃がどこかに接触してしまった時点で、本来の切れ味は損なわれてしまいますのでご注意ください。)

<収納方法>

刃先を下向きにし、左図②の部分ケースに差し込み、その後刃先をケースに当てないように左図③の部分を上から下にカチッと音がするまで軽く押し込んでください。

KAI眼科メス 定価一覧表

マイクロサージェリーナイフ

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
スリットナイフ 1.3mm	SLU-13AGF	000MK4213	4560146923862	5本	¥9,500
スリットナイフ 1.4mm	SLU-14AGF	000MK4214	4560146923879	5本	¥9,500
スリットナイフ 1.5mm	SLU-15AGF	000MK4215	4560146923886	5本	¥9,500
スリットナイフ 1.6mm	SLU-16AGF	000MK4216	4560146923893	5本	¥9,500
スリットナイフ 1.7mm	SLU-17AGF	000MK4217	4560146923909	5本	¥9,500
スリットナイフ 1.8mm	SLU-18AGF	000MK4218	4560146923985	5本	¥9,500
スリットナイフ 1.9mm	SLU-19AGF	000MK4219	4560146924029	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.0mm	SLU-20AGF	000MK4220	4560146923992	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.2mm	SLU-22AGF	000MK4222	4560146924760	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.3mm	SLU-23AGF	000MK4223	4560146924692	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.4mm	SLU-24AGF	000MK4224	4560146924708	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.5mm	SLU-25AGF	000MK4225	4560146924005	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.65mm	SLU-265AGF	000MK4265	4560146923930	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.75mm	SLU-275AGF	000MK4275	4560146924043	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.8mm	SLU-28AGF	000MK4228	4560146923916	5本	¥9,500
スリットナイフ 2.85mm	SLU-285AGF	000MK4285	4560146924036	5本	¥9,500
スリットナイフ 3.0mm	SLU-30AGF	000MK4230	4560146923282	5本	¥9,500
スリットナイフ 3.2mm	SLU-32AGF	000MK4232	4560146923299	5本	¥9,500
スリットナイフパラレルサイド 2.0mm	SLP-20	000MK4120	4560146926788	5本	¥10,000
スリットナイフパラレルサイド 2.2mm	SLP-22	000MK4122	4560146927129	5本	¥10,000
スリットナイフパラレルサイド 2.4mm	SLP-24	000MK4124	4560146926795	5本	¥10,000
スリットナイフパラレルサイド 2.8mm	SLP-28	000MK4128	4560146926870	5本	¥10,000
スリットナイフトリプルカット 2.4mm	SLT-24	000MK4931	4560146927136	5本	¥10,000
スリットナイフトリプルカット 2.65mm	SLT-265	000MK4932	4560146927143	5本	¥10,000
スリットナイフトリプルカット 2.8mm	SLT-28	000MK4933	4560146927150	5本	¥10,000
スリットナイフトリプルカット 3.0mm	SLT-30	000MK4930	4560146926801	5本	¥10,000
DSAEKナイフ 4.6mm	DSK-46	000MK4846	4560146926757	5本	¥10,000
DSAEKナイフ 5.0mm	DSK-50	000MK4850	4560146926764	5本	¥10,000
ブレブナイフ2 1.0mm	BKB2-10AGF	000MK4608	4560146925903	5本	¥13,250
ブレブナイフ 1.0mm Straight	BKS-10AGF	000MK4609	4560146925316	5本	¥13,250
ブレブナイフ 1.0mm	BKB-10AGF	000MK4610	4560146925323	5本	¥13,250
リビジョンスリットナイフ 1.0mm	RV-10	000MK4010	4560146926856	5本	¥13,250
ゴルフ刀	GK-24	000MK4011	4560146928157	5本	¥13,000
インプラントナイフ 2.8mm	RNU-28AGF	000MK4528	4560146924715	5本	¥9,500
インプラントナイフ 3.0mm	RNU-30AGF	000MK4530	4560146924722	5本	¥9,500
インプラントナイフ 3.2mm	RNU-32AGF	000MK4532	4560146924739	5本	¥9,500
インプラントナイフ 3.5mm	RNU-35AGF	000MK4535	4560146923947	5本	¥9,500
インプラントナイフ 4.1mm	RNU-41AGF	000MK4541	4560146923312	5本	¥9,500
インプラントナイフ 4.6mm	RNU-46AGF	000MK4546	4560146926436	5本	¥9,500
インプラントナイフ 5.1mm	RNU-51AGF	000MK4551	4560146923329	5本	¥9,500
インプラントナイフ 5.2mm	RNU-52AGF	000MK4552	4560146923954	5本	¥9,500
インプラントナイフ 5.6mm	RNU-56AGF	000MK4556	4560146924159	5本	¥9,500

涙嚢切開ナイフ

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
涙嚢切開ナイフ 1.5mm	DCR-15	000MK4015	4560146928256	5本	¥10,000

硝子体注射キャリパー

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
硝子体注射キャリパー	SC3540	000MK3430	4560146928126	600本	¥300,000

※最小出荷単位は2箱


トーリックゲージ/マーカー

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
トーリックゲージ/マーカー	TOGM	000MK3421	4560146928089	5セット	¥15,000

KAI眼科メス 定価一覧表


セーフティナイフ

品名	REF.番号	品番コード	商品JANコード	1箱入数	定価(税抜)
ストレートナイフ 0°	SK-A0	000MK4603	4560146926412	5本	¥4,000
ストレートナイフ 15°	SK-A15	000MK4600	4560146925002	5本	¥4,000
ストレートナイフ 22.5°	SK-A225	000MK4601	4560146925217	5本	¥4,000
ストレートナイフ 30°	SK-A30	000MK4602	4560146925019	5本	¥4,000
クレセントナイフ 1.6mm	SK-CPU16	000MK4613	4560146926023	5本	¥14,500
クレセントナイフ 2.2mm	SK-CPU22	000MK4611	4560146925224	5本	¥14,500
クレセントナイフ 2.6mm	SK-CPU26	000MK4612	4560146925231	5本	¥14,500
クリアコーニアルナイフ 1.8mm	SK-CCR18M	000MK4659	4560146925941	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 2.0mm	SK-CCR20M	000MK4660	4560146925958	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 2.2mm	SK-CCR22	000MK4661	4560146925095	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 2.3mm	SK-CCR23	000MK4662	4560146925101	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 2.4mm	SK-CCR24	000MK4663	4560146925118	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 2.8mm	SK-CCR28	000MK4666	4560146925125	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 3.0mm	SK-CCR30	000MK4667	4560146925132	5本	¥10,000
クリアコーニアルナイフ 3.2mm	SK-CCR32	000MK4668	4560146925149	5本	¥10,000
スリットナイフ 1.8mm	SK-SLU18M	000MK4630	4560146925927	5本	¥10,000
スリットナイフ 2.0mm	SK-SLU20M	000MK4631	4560146925934	5本	¥10,000
スリットナイフ 2.2mm	SK-SLU22	000MK4638	4560146925033	5本	¥10,000
スリットナイフ 2.3mm	SK-SLU23	000MK4639	4560146925040	5本	¥10,000
スリットナイフ 2.4mm	SK-SLU24	000MK4640	4560146925057	5本	¥10,000
スリットナイフ 2.8mm	SK-SLU28	000MK4644	4560146925064	5本	¥10,000
スリットナイフ 3.0mm	SK-SLU30	000MK4646	4560146925071	5本	¥10,000
スリットナイフ 3.2mm	SK-SLU32	000MK4648	4560146925088	5本	¥10,000
MVRナイフ 20G Bent	SK-VKB20G	000MK4622	4560146925026	5本	¥10,000

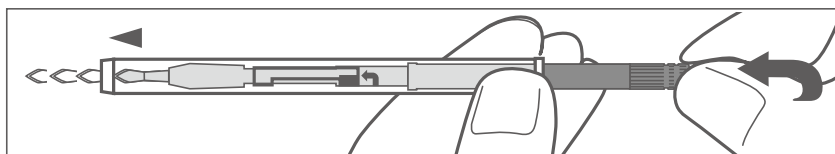

<取り出し方法>

透明ケース部分を指で保持した状態でスライダー部分を時計回りに回転させ、そのまま前に押し出してください。
ご使用前に、スライダー部分が完全に固定されていることを確認してください。

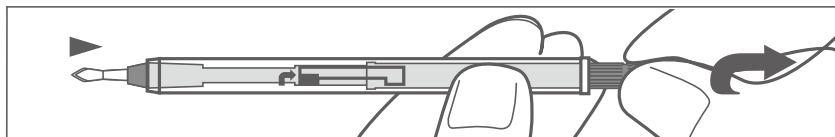

<収納方法>

透明ケース部分を指で保持した状態でスライダー部分を時計回りに回転させ、そのまま後ろに引き戻してください。
収納後に、スライダー部分が完全に固定されていることを確認してください。

スリットナイフトリプルカット:特許第6317934号 / 発明者:堀尾直市先生
 ブレブナイフ:特許第5221916号 / 発明者:相良健先生
 KMM ナイフ:特許第5795188号
 セーフティナイフ:特許第5095163号
 クリアコーニアルナイフ:特許第4226429号
 KAITーリックゲージ/KAITーリックマーカ:特許第6476229号
 涙嚢切開ナイフ:特願2020-172726/ 発明者:園田真也先生



仕様は変更することがあります ■



製造販売元

カイ インダストリーズ株式会社

医療器事業本部 国内営業部
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
Phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
Email: info-ind@kai-group.com
<http://www.kai-group.com/global>

KAI眼科手術用ナイフカタログ

KIM-023 0606/2010 PDF19